

Produktfaktablad TENA Comfort

Användningsområde

TENA Comfort är ett mycket läckagesäkert och komfortabelt tvådelat skydd för medelstora till mycket stora urinläckage. TENA Comfort finns i flera olika absorptionsnivåer (Normal, Plus Compact, Extra, Super, Maxi och Ultima). Rätt storlek och kvalitet på fixeringsbyxa är viktigt för att produkten ska sitta säkert på plats.



Unik skålformad läckagebarriär

Diskret våtindikator



Anatomisk utformning

Spridningskiktet FeelDry™ kapslar snabbt in urin och håller huden torr

Mjuka, textilliknande andningsbara material i hela produkten

Odour Neutralizer för neutraliserande effekt på oönskad lukt



Anpassad för användning tillsammans med TENA SmartCare Change Indicator

TENA. HÅLLBAR INDIVIDUELL INKONTINENSVÅRD.

Produktfaktablad TENA Comfort

Produktegenskaper

TENA Comfort är ett mycket läckagesäkert skydd. Dubbla absorberande kärnor med superabsorbenter tillsammans med spridningsskiktet FeelDry™ gör att urinen sprids och absorberas effektivt. Ytan mot huden hålls torr vilket främjar en god hudhälsa.

Skyddet har en anatomisk utformning och en unik patenterad skålformad läckagebarriär (rund skålelastik) som gör produkten läckagesäker och förhindrar sidoläckage.


TENA Comfort är ett mycket komfortabelt och hudvänligt skydd. ConfioAir™ - andningsbara material (inklusive spärrskikt) ger ökad komfort och främjar god hudhälsa. Det textilliknande materialet gör skyddet prasselfritt.

TENA Comfort har Odour Neutralizer, d v s är försett med superabsorbenter som innesluter urin, men även en del odör och har en neutraliserande effekt på oönskad lukt. Skyddet har våtindikator och tydlig färgmarkering för hjälp vid val av absorptionsnivå.



TENA Comfort										
Uppsugningsnivå/ storlek	Svanen- märkt	Längd cm	Bredd cm	Vikt g	Antal/påse st	Antal/kart st	Antal.kart pall	Praktisk absorption	ISO 11948-1 Absorptions kapacitet	Essity Art.nr
Normal	✓	52	22	46	42	126	20	376	1128	75 90 07
Plus Compact	✓	52	22	60	60	126	20	544	1631	75 27 44
Extra	✓	63	27	78	40	80	20	615	1844	75 90 09
Super	✓	63	27	88	36	72	20	804	2413	75 90 10
Maxi	✓	66	29,5	111	28	56	20	995	2985	75 90 12
Ultima	✓	66	29,5	117	26	52	20	1154	3463	75 90 11

Användarinstruktion

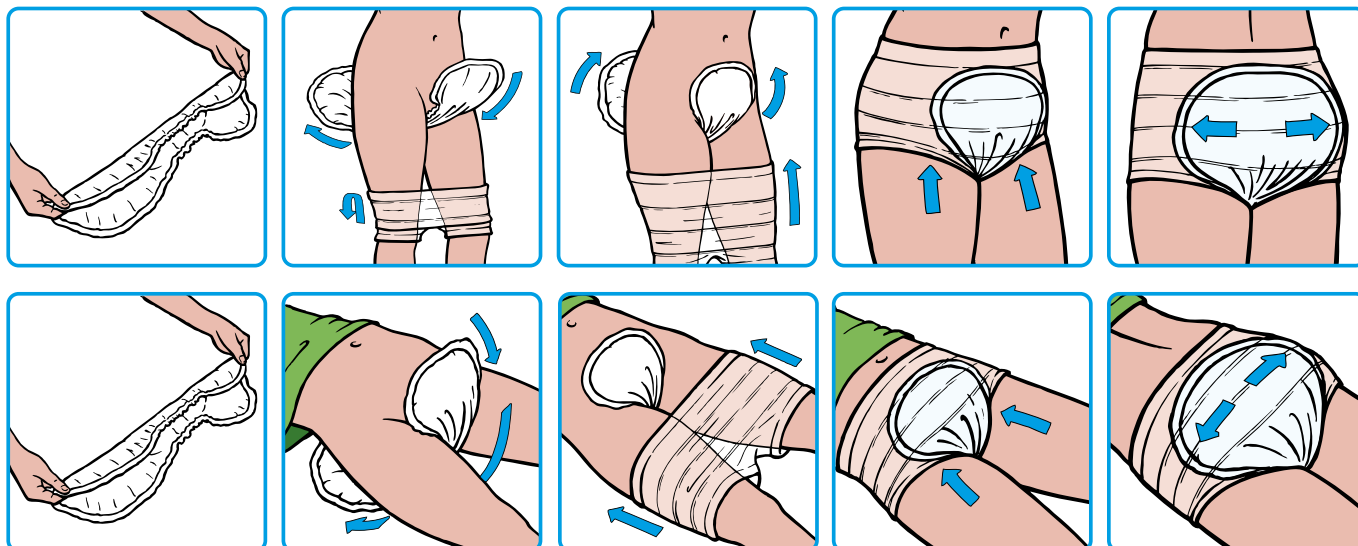

Vik ihop skyddet efter användning och kasta enligt gällande avfallshantering.

Produktfaktablad TENA Comfort

Ingående material

YTSKIKT INSIDA

Material: Nonwoven

Funktion: Torrhet/mjukhet mot huden

YTSKIKT UTSIDA

Material: Nonwoven

Funktion: Ökad bekvämlighet och diskretion (prasselfri)

INSLÄPPS- OCH SPRIDNINGSMATERIAL

Material: Polyethylene

Funktion: Snabbt insläpp och effektiv spridning av urin, motverkar urin att tränga tillbaka upp till ytan

ABSORBTIONSKÄRNA, Övre

Material: Cellulosamassa och superabsorbenter

Funktion: Sprida, absorbera och hålla kvar vätska

ABSORBTIONSKÄRNA, Undre

Material: Cellulosamassa och superabsorbenter

Funktion: Sprida, absorbera och hålla kvar vätska

SUPERABSORBENT

Material: Polyacrylat

Funktion: Absorbera och hålla kvar vätska samt till viss del neutralisera oönskad lukt

SPÄRRSKIKT

Material: Polyeten andningsbar

Funktion: Förhindra läckage/genomvätning, tillåta fuktig luft att ventileras ut från skyddet och på så sätt bibehålla en god hudmiljö och komfort

ELASTIK (TENA Comfort skålformad läckagebarriär)

Material: Polyisopren

Funktion: Bilda skälbarriär och förhindra läckage

För samtliga TENA Comfort skydd gäller att följande material /ämnen inte har tillsats produkterna: naturgummi (latex), PVC, kolofonium, doftämnen, hudvårdande medel eller parfym.

Produkterna kan användas tre år efter tillverkningsdatum. Lagras under normala förhållanden och ej utsätts för extrema temperaturer eller väta.

Produkterna är klassificerade som medicinteknisk produkt och är CE-märkta.

Kontakta oss för mer information

☎ 020 - 27 20 20

🌐 www.tena.nu

✉ tena.nu@essity.com

📘 facebook.com/TENASverige



TENA
an Essity brand